

# 特殊なアンカーで正しい姿勢



OMUNI x A.A.T.H.®

フォトンクッション Carna®  
— カルナ —

特許第7049714号




特許取得技術の  
アンカー構造



三層構造の  
クッションで  
優れた体圧分散性




インナーに  
清拭タイプカバー

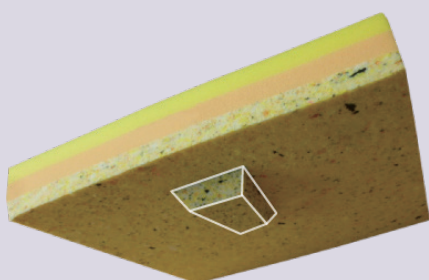


正しい姿勢をサポート  
**アンカー構造**

クッションの裏面にある特殊なアンカーによって違和感を感じさせずに姿勢をサポート。前に崩れてしまう骨盤の後傾を抑えます。

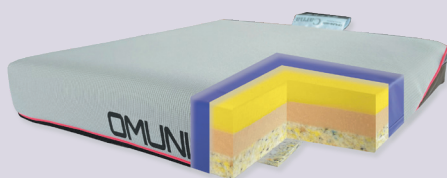

適度な厚みと  
**体圧分散性**

人体に近い柔らかさと組成を実現したウレタンの配置によって、6cmの薄さでも高い体圧分散性能があります。

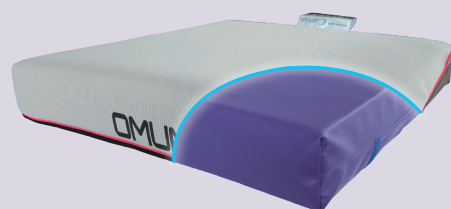

防水生地を使用した  
**インナーカバー**


アウターカバーは洗濯で衛生的に、インナーカバーは清拭消毒ができる為、メンテナンスが容易です。

## 製品仕様

サイズ / 幅 40 cm × 長さ 40 cm × 厚さ 6 cm      重さ / 約 810g

### 〈材 質〉

|                     |      |                             |
|---------------------|------|-----------------------------|
| アウターカバー / 表側        | 表面   | ポリエステル 100% (アースパウダー含有)     |
|                     | 中材   | ポリウレタンフォーム                  |
|                     | 裏面   | ポリエステル 100%                 |
| 裏側                  |      | ポリエステル 100% (スベリ止めシリコン接着加工) |
|                     |      |                             |
| インナーカバー /           | 表面   | ポリウレタンラミネート                 |
|                     | 裏面   | ポリエステル 100%                 |
| クッション材 /<br>(アンカー付) | 上層   | ポリウレタンフォーム                  |
|                     | 中層   | ポリウレタンフォーム                  |
|                     | 下層   | ミクセルフォーム                    |
|                     | アンカー | ミクセルフォーム                    |

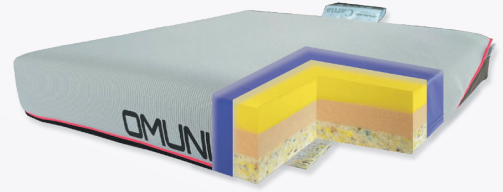


価格 / 26,400 円 (税込)

〈使用方法〉 車いす等の着座部に置いて使用します。グレーの面を上にしてお使いください。  
前後の向きはラベル面を背もたれ側に向けてください。

アウターカバーに血行促進をサポートする繊維を使用

アース繊維® は、ポリエステル繊維内に複数の貴金属微粒子を練りこんだハイブリッド素材です。  
身体から発する遠赤外線などの光を吸収・輻射します。

A.A.TH® 繊維 / アース繊維® はオンヨネ株式会社の登録商標です

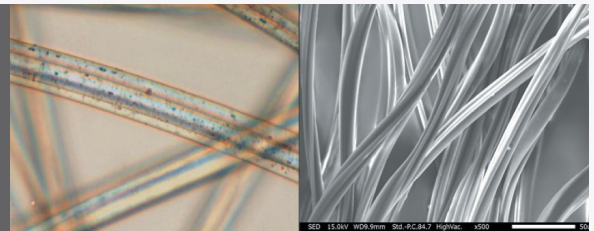


## 関連商品

— 長時間同じ姿勢で過ごすことで起こる肩甲骨・下半身の血行不良 —  
気になる身体の血行促進をサポート

フォトンケット  
**Notos®**  
— ノトス —

M サイズ / 幅 75 cm × 長さ 120 cm  
L サイズ / 幅 75 cm × 長さ 130 cm  
価格 / 17,160 円 (税込)

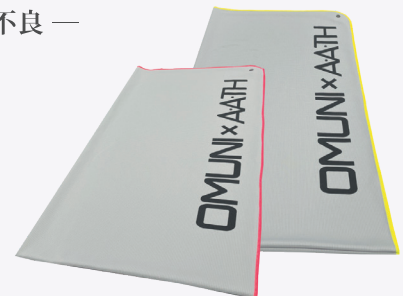

### 取扱店

### 製造元

株式会社オムニ商会

〒069-0210

北海道空知郡南幌町南10線西14番地

TEL: 011-378-7080 FAX: 011-378-7081

<https://omuni.co.jp/>

### 〈取り扱い上の注意〉

- ・火気に接触したり、近づけた場合には発火する危険性がありますので、火のそばには近づけないでください。
- ・アウターカバーは洗濯可能です。洗濯の際は、洗濯ネットをご使用ください。また、洗濯液や水につけたままにしないでください。
- ・変色する場合がありますので、洗濯の際の使用洗剤には塩素系を使用しないでください。また、他のものに色移りすることがあります。他のものと分けて洗濯してください。
- ・洗濯してもアース繊維® の効果は変わりません。
- ・インナーカバーは防水仕様です。汚れた場合、ふき取りまたは洗濯してください。高濃度の薬品を使用したふき取りは生地への劣化に繋がる恐れがあります。
- ・クッション材の洗濯は不可です。
- ・口には入れないでください。



株式会社オムニ商会