

オムニマット・シリーズ

総 | 合 | カ | タ | ロ | グ

vol.2

OMUNI mattress series
General Catalogue



■販売店

■製造元



株式会社オムニ商会
<https://omuni.co.jp/>

〒069-0210 北海道空知郡南幌町南10線西14番地
TEL.011-378-7080 FAX.011-378-7081

【取扱い上のご注意】

●中材をカバーから外して使用しないで下さい。●火気のある場所では使用しないで下さい。●口には入れないで下さい。●洗濯を繰り返すうちに中材が黄変する場合がありますが、品質には問題ありませんので変わずご使用いただけます。●紫外線は中材の劣化の原因となりますので、直射日光や紫外線消毒はお止め下さい。

※商品を詳しくお知りになりたい方は、お気軽にお問い合わせ下さい。 ※仕様などについては変更となる場合がございますのでご了承下さい。

2024.11



株式会社オムニ商会
<https://omuni.co.jp/>

医療・介護用品を通して 清潔で快適な 療養環境を提供します

INDEX

管理別チャート	03
褥瘡リスクチャート	05

医療用寝具 オムニマットシリーズ

オムニマット ラテ	07
オムニマット フォレス	09
オムニマット	11
オムニマット オプション	12



体位変換クッション ポジショニング用品

ポジショニング用品	13
体位変換クッション おむみん	14
イージーターン くるりん	15
おむみんグローブ するりん	16
ポジショニング用品の使い方	17



より快適な生活を送っていただくために その他介護用品

トリオレ the 布団	19
OMUNI×A.A.TH®	20
保育園用アイテム	21
サイズ・仕様・価格一覧	22



衛生管理はどちらの方法を希望されますか？




マットレス内部まで
洗浄したい
(臭い・カビ対策)


蒸れなく快適な
療養環境を確保し、
いつでも洗えるのが一番

洗濯コストを抑える為、
防水カバーも併用したい

洗濯タイプ

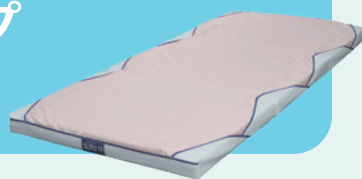

切替タイプ

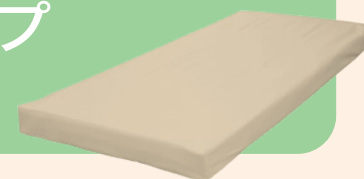

清拭タイプ



衛生管理における洗濯方法

1. 80℃10分の熱水消毒
2. 120℃10分の熱風貫通乾燥

熱水消毒+熱風貫通乾燥で内部まで衛生的

感染症リスクの低減

アレルゲンの蓄積予防

利用者様の快適性向上

表面の清拭にて
対応したい



対象者に応じて、
通気・清拭を使い分けたい

内部の洗浄は
1回/年程度で良い

衛生管理における清拭方法

- ・消毒液※を塗布した新しい布で、
マットレス表面を一定の方向に拭き取る
- ・側面、裏面も同様に行う
(汚物が残っている場合は、汚物を取り除き、
中性洗剤で洗浄し乾いた布で拭き取ってから清拭してください)

※0.1%(1000ppm)濃度の次亜塩素酸ナトリウム又は76.9～81.4%濃度のエタノール

褥瘡リスクに応じたマットレス分類

「OHスケール」により、Q1～4の合計点数から算出された床ずれのリスクを判定し、オムニラインナップから最適なマットレスを選定します。

OHスケール

褥瘡(じょくそう)※危険要因点数表 全患者版 大浦・堀田スケール
下記の4つの危険因子から、床ずれになりやすいかどうかを判定。
これまでの研究から点数により発症確率、治癒期間などがわかっている。 ※床ずれのこと

Q1

ベッドの上で寝返りしたり、動けますか？

・動ける 0点

・どちらでもない 1.5点

・動けない 3点

点

Q2

お尻の骨の飛び出し具合は次のうちどれですか？

仙骨

正常

仙骨

8cm

2cm以内

軽度・中程度

仙骨

8cm

2cm以上

高度

・正常 0点

・軽度・中程度 1.5点

・高度 3点

点

Q3

むくみはありますか？
(優しく押してへこんだ部分が戻りますか？)

・なし 0点

・あり 3点

点

Q4

関節が硬くなって手足を伸ばしにくいですか？

・いいえ 0点

・はい 1点

点

0点

危険因子 なし

オムニマット

褥瘡リスクのない方

0～6点

危険因子 なし～中等度

オムニマット
フォレス

ベッド上で過ごされる方で中等度の褥瘡リスク予防を必要とする方

4～6点

危険因子 中等度

オムニマット
ラテ

ベッド上で過ごされる方で中等度の褥瘡リスク対策を必要とする方

7～10点

危険因子 高度

高機能型エアーマットレスを推奨します。



詳細は
こちらから

01



機能性、快適性、そしてやさしさを兼ね備えた体圧分散マットレスです。

オムニマット ラテ

洗濯

快適性にアドバンテージ



オムニマットの基本である 洗濯を主としたタイプ

カセットの取り外しが簡単で、
汚れた部分だけを交換し洗濯する事が可能です。
通気性もあり快適な寝心地です。



切替

汎用性にアドバンテージ




清拭と洗濯の 両方使い分けできるタイプ

普段は清拭として使用できますが、
ご利用者の湿潤を軽減したい時などには、
簡単に防水カバーを外せて通気性の
ある洗濯タイプとして使用できます。
折畳み可能で、収納もコンパクトに行えます。



清拭

作業性にアドバンテージ

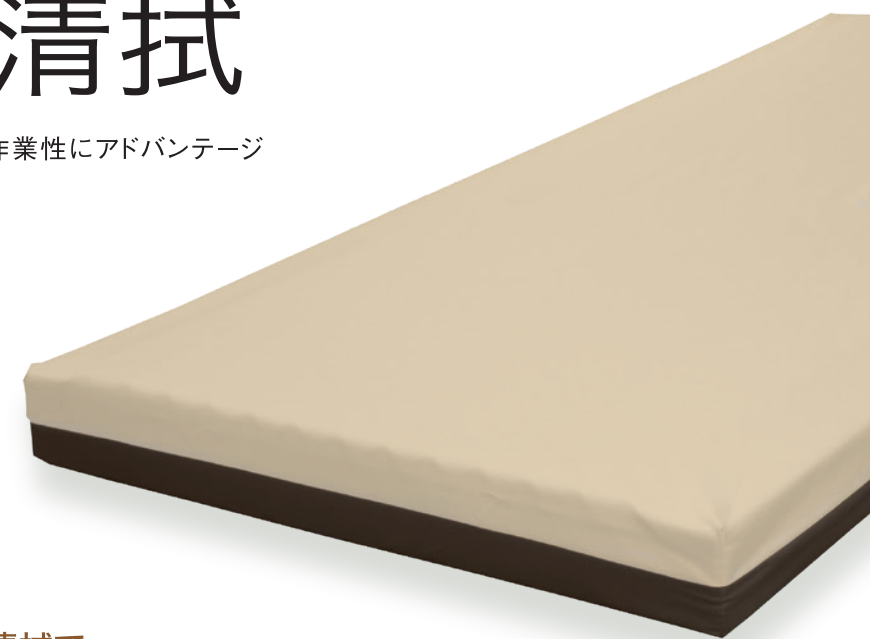


清拭で 衛生管理を行うタイプ

裏表の入替えが簡単で
リバーシブル機能を有効に活用できます。
普段は清拭消毒で衛生管理を行って頂けますが、
臭いやシミが気になる時は、防水カバーも
高温洗濯・高温乾燥が可能で安心です。



■ ソフト・ハードのリバーシブル仕様

オムニマット ラテは、体圧分散の良いソフト面と、しっかりとした
寝心地のハード面が使用できるリバーシブル構造。褥瘡リスク
の有無や寝心地の好みに応じた使い分けが可能です。

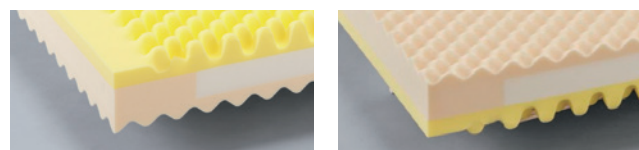


ソフト面

ハード面

■ 体圧分散性を向上

オムニマット ラテは新素材ウレタン採用により接触面積が広く、高い体圧分散能力を
発揮します。また、柔らかいのに高弾性で動きやすく、より幅広く、多くの方に安心してご
利用いただけるマットレスです。


被験者／健康者男性(身長:166cm 体重:60kg BMI:21.7) 測定器／ABW社製 エルゴチェック

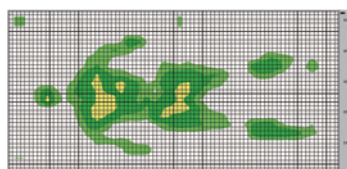

体圧分散図

■ 新素材「ラテックス風ウレタン」を採用

体圧分散性と動きやすさの
両立、また快適性の向上を新
素材で実現。新素材はラテ
ックスの使用感をモチーフとし
たウレタンでラテックスよりも
軽く快適性も抜群です。

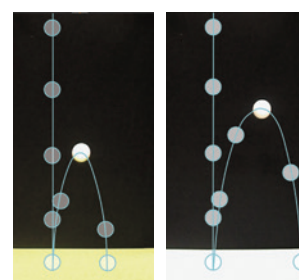


ウレタン

新素材ウレタン

■ 端座位の取りやすいサイドエッジ

端座位を取るとずり落ちやすいことを心配される方や、
マットへの乗り降り時に不安を感じるご利用者は多い
ものです。オムニマット ラテは、実際のご利用シーンを
想定し、サイドエッジを設け安定した移乗が可能です。

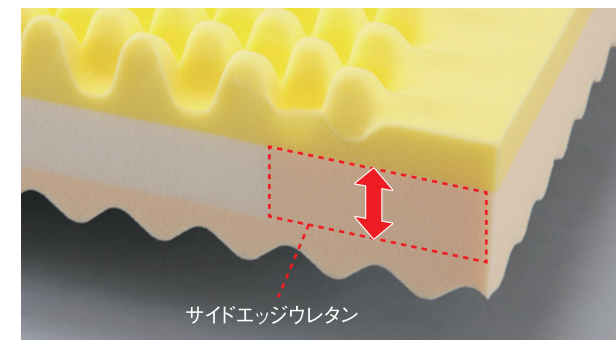

120mm幅のサイドエッジウレタン

もっと使いやすくなる工夫を盛り込みました。

持ち運び用
取っ手



連結カバーの2箇所に
取っ手を設けました。
持ち運びが容易です。

※洗濯タイプ・切替タイプのみ

手触り滑らかな防水カバー
“ワイプカバー”



オムニマット ラテの防水カバーには、
撥水加工を施したなめらかな肌触りと
防水性を持つ特別な生地を使用し
ています。



選べる3つのニュータイプマットレス

オムニマット フォレス

洗濯

快適性にアドバンテージ




オムニマットの基本である 洗濯を主としたタイプ

カセットの取り外しが簡単で、
汚れた部分だけを交換し洗濯する事が可能です。
通気性もあり快適な寝心地です。



切替

汎用性にアドバンテージ

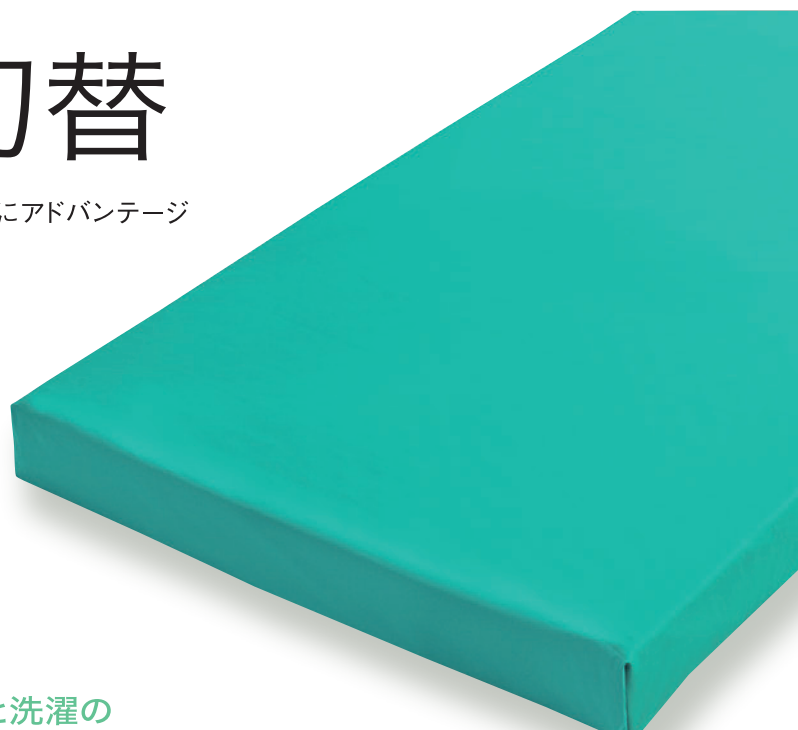

清拭と洗濯の 両方使い分けできるタイプ

普段は清拭として使用できますが、
ご利用者の湿潤を軽減したい時などには、
簡単に防水カバーを外せて通気性の
ある洗濯タイプとして使用できます。
折畳み可能で、収納もコンパクトに行えます。



清拭

作業性にアドバンテージ




清拭で 衛生管理を行うタイプ

裏表の入替えが簡単で
リバーシブル機能を有効に活用できます。
普段は清拭消毒で衛生管理を行って頂けますが、
臭いやシミが気になる時は、防水カバーも
高温洗濯・高温乾燥が可能で安心です。




■ ソフト・ハードのリバーシブル仕様

オムニマット フォレスのウレタンは、ソフト面は体圧分散の良いソフトなウレタン、ハード面はしっかりとした寝心地を持つハードなウレタンのリバーシブル構造。褥瘡リスクの有無や寝心地の好みに応じた使い分けが可能です。

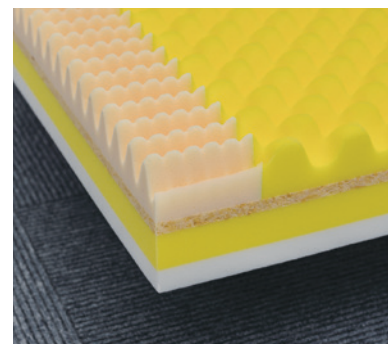


ソフト面

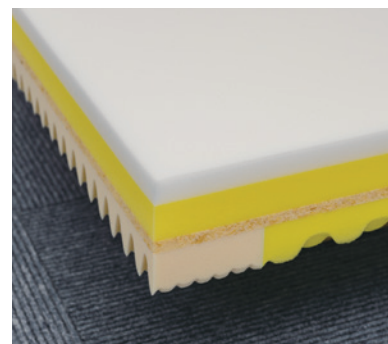


ハード面

体圧分散図
被験者／健康者男性(身長:167cm 体重67kg BMI:24.0)
計測器／ABW社製 エルゴチェック

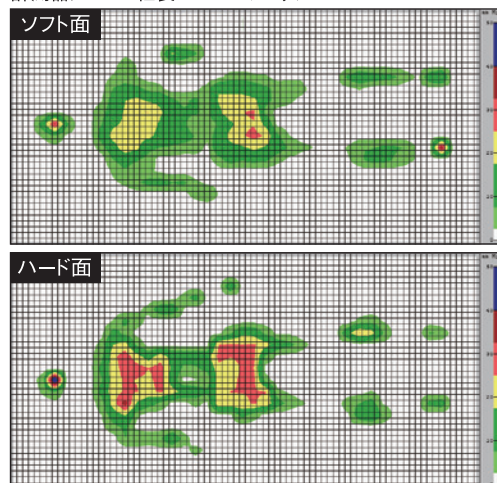

■ 端座位の取りやすいサイドエッジ

端座位を取るとずり落ちると心配されたり、マットへの乗り降り時に不安を感じるご利用者は多いものです。オムニマット フォレスは、実際のご利用シーンを想定し、サイドエッジを設けました。

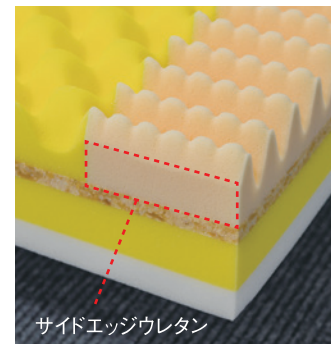

サイドエッジウレタン
90mm幅のサイドエッジウレタン



もっと使いやすくなる工夫を盛り込みました。

※洗濯タイプ・切替タイプのみ

持ち運び用取っ手



セットカバーは3分割で折りたたみ可能。
運搬、収納にとっても便利。



連結カバーの2箇所
に取っ手を設けました。
持ち運びが容易です。



03

特殊寝台付属品 貸与



普通のマットレスは、もういない。ふとんでもマットレスでもない新発想。

オムニマット

一般床向けに寝心地の良い適度な硬さを実現。
コンパクトな3つ折りで収納もすっきり。



裏面滑り止め加工
(ベットとマットのズレを軽減)

プロファイル構造



オムニマットの特長

■ 寝心地の良い適度な硬さを実現

特殊な発泡による、高密度で耐久性の高いウレタンフォームを中素材に採用。オムニマットだけで利用できる適度な硬さになっています。

※P12プリベントパットとの併用により清拭マットとしても使用できます。

■ 滑り止め付きで、安全にも配慮

セットカバーの裏面には、滑り止め効果の高いシリコン樹脂を接着加工。ギャッチベッドに使用しても、ズレにくく、より安全性にも配慮しました。

■ 3カセットローテーション (オムニマット共通)

カセット単位での交換・消毒・洗浄が可能なオムニマットは、清潔で快適な療養環境を提供するとともに、介助者の方々の労力削減にも役立ちます。

オムニマットは持ち運びラクラク。スペースもとらない。



取り外しが簡単なカセットは、1つが約1.5kg。汚れたカセットだけ、手軽に入れ替えます。



幅1m以内・約4～5kgの軽量・コンパクト設計。看護師スタッフ一人で手軽に持ち運びできます。



コンパクトな3つ折りで、厚さ25cm以内だからキッチリと積めて、収納スペースもすっきり。



04

専用シーツの利用で、さらに省力・省スペース

オムニマット オプション

クイックケアシーツ 上下・両端を筒状に縫った専用シーツです。

■ スピーディーなベッドメイク

上下・両端を縫った専用シーツです。マットの頭部にかぶせ手前に引き、足部分にかぶせるだけで、一人でスピーディーなベッドメイクが可能です。

■ 耐久性が高く、長持ち

低温プラズマ加工によって、生地のパリエステル(49%)部分の表面に半永久的な防汚性、吸水性、制電性を付与。洗濯耐久性が高く、長持ちするシーツです。



プリベントパット (オムニマット専用防水カバー)

オムニマットを清拭タイプとしてご利用いただくためのカバーです。オムニマットの四つ角にベルトで固定します。表面は防水加工で消毒剤等の対応が可能です。簡単に清拭マットへの切り替えが可能で、使わないときはたたんでリネン庫に収納できます。



コーナーベルト

オムニマットに
装着時

その他のベッド周辺アイテム

ベッドの足元の隙間を埋めるスペーサーや、付き添い用寝具・災害備蓄用の2つ折りのオムニマット、ファスナーの開閉に制限がかけられるロックファスナー仕様の防水カバーなど実績があります。

※こちらは[特注品]となります。その為、納期や価格など通常品とは異なりますので詳細は担当者までお問い合わせください。



ベッドスペーサー



2つ折りマット

ポジショニング用品

おむみん

快眠

しっかり
支えるケア

動画でわかる
事例つき

P17-18

するりん
快適

ズレを
取りのぞくケア

身体に
触れないケア

するりん

安眠



05

体位変換器 貸与



詳細は
こちらから

オムニマットシリーズから快適・快眠クッション

体位変換クッション おむみん



体位変換クッション おむみんの特長

■ しっかりした保持と追従性

ウレタンキューブとビーズの組合わせでしっかりと支えながら、身体に沿って柔軟に変形します。

■ 高通気性素材でムレ軽減

吸汗速乾のカバーで肌触りが良く、高通気性の中材で湿気を拡散します。

■ カバーの着脱が可能

シミや破損の際には、カバーだけ交換してコストを削減できます。

■ 簡単メンテナンス

- ・施設や家庭内でも洗濯OK
- ・熱水消毒80℃10分にも対応

- ・乾燥機設定温度120℃まで対応
- ・自然乾燥で約10時間※

※乾燥環境により多少前後します。



バリエーション

各サイズについてはP24をご覧ください



CP1-P
ピロータイプ



CP2-S
三角タイプ



CP3-W
ウェーブタイプ



CP4-B
ブーメランタイプ



CP5-D
連結タイプ

交換用カバーの単品販売も可能です(P24備考欄参照)

※取っ手だけを握み、利用者を持ち上げることは危険ですでお止め下さい。



詳細は
こちらから

07

からだの移動や体位変換などのケアに

おむみんグローブ するりん



おむみんグローブ するりんの特長

■ 圧とズレを取り除く[手当て]のケア

背上げ・下げを行った後や体位変換を行ったあとにするりんで身体を撫でることで、圧やズレを取り除くことができます。



■ おむみんグローブ するりんの使い方

するりんは腕にはめて使います。肩甲骨や仙骨など体重がかかる部位は揃えた腕の中心に、体重がかかる場所を乗せて使用します。



■ ベッド上のケアやからだの移動に


からだを移動させる際、するりんを装着した腕を差し込み、身体を手前に引くなど“持ち上げない”工夫をすることで 筋緊張の予防につながります。



06

新しい体位変換のかたち

◇ イージーターン くるりん

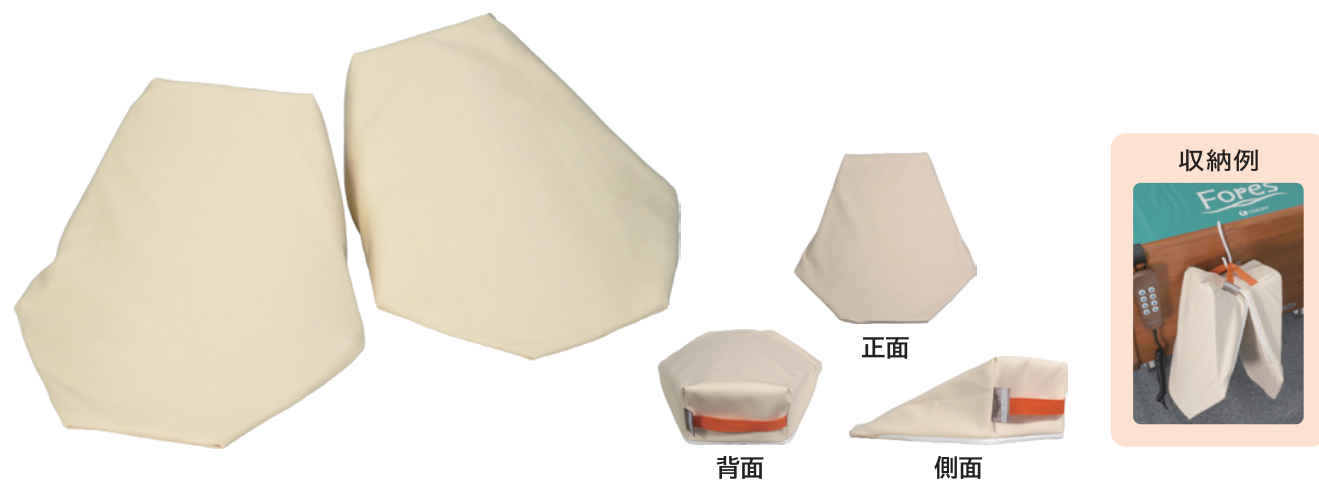

イージーターン くるりんの特長

介助負担の
軽減

睡眠環境の
向上

拘縮、
スキントアの
予防

マットレスの下に差し込むだけで簡単に使用できるため 人的・時間的コストの軽減につながり、患者さまに直接触れることなく体位変換ができるため夜間の睡眠を妨げにくくなります。また、身体に直接触れることによって発生する筋緊張やズレによるスキントアのリスクを軽減できます。

■ イージーターン くるりんの使い方



ポジショニングに必要な知識やコツを分かりやすく解説！

動画でわかる！「ポジショニング」講座

STEP

1

3つのキーワード

「面積」「支える」「なじませる」



<例1>



<例2>



CP1-P



CP2-S



CP3-W



CP4-B



CP5-D



二次元バーコードの使い方

- ① お手持ちのスマートフォンの二次元バーコードリーダーを立ち上げます。
- ② 見たいポジショニング動画の二次元バーコードを読み取ります。
- ③ 詳しいポジショニング動画が始まります。



STEP

2

「ズレ」を取り除く



するりん



STEP

3

「安眠」と「負担軽減」



くるりん



オムニ商会の公式YouTubeチャンネルでは、ポジショニングケアや褥瘡に関する情報を発信しています。ぜひ、ご活用ください。

オムニ商会 公式YouTubeチャンネル <https://www.youtube.com/@omuni1617>



08

車いす 付属品 貸与

車いすの座り心地向上・臀部の痛み軽減に

車いす用クッション トリオレ the 布団



快適な車いすクッションー。
座り心地を一番に考え、通気の良いクッション材を用いました。また、ムレにくく肌触りの良い生地をカバーに使用しています。車いす上でも安定した姿勢で、快適にお過ごしいただけます。



トリオレ the 布団の特長


■ 座り心地を向上

柔軟なウレタンはしっかりと臀部を包み込み、臀部とクッションがしっかりと密着することで安楽な姿勢を保持し、臀部の痛みを軽減します。三層のウレタン層がほどよく身体を支え、車いすの座り心地を向上します。

■ 洗濯可能

〈医療現場で証明された洗濯耐久性〉

汚れてしまった場合もすぐに洗濯できるので、衛生的で安心してご利用いただけます。マットレスでも実績のある、洗濯に強いウレタンなので、カバーごと丸洗いが可能な車いすクッションです。

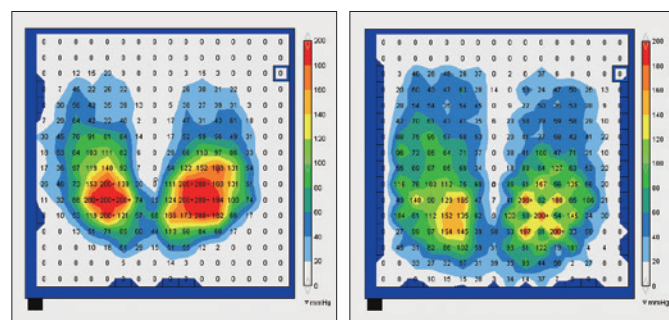

クッション不使用時

トリオレthe布団使用時



リサイクル・チップウレタン使用



09


“血行”に着目した特殊繊維ブランド

OMUNI×A.A.TH®

フォトンクッション **Carna**
— カルナ —



特許第7049714号

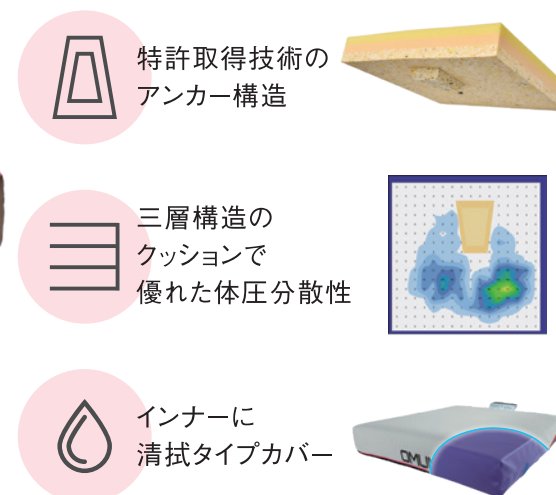

※この商品のウレタンは洗濯できません。




フォトンケット
Notos
— ノトス —

長時間同じ姿勢で過ごすことで起こる血行不良。
身体の気になる部分にNotosを使用することで血行促進をサポートします。



血行促進をサポートする繊維を使用

アース繊維®は、ポリエステル繊維内に複数の貴金属微粒子を練りこんだハイブリッド素材です。
身体から発する遠赤外線などの光を吸収・輻射します。
A.A.TH®繊維 / アース繊維®はオンヨネ株式会社の登録商標です

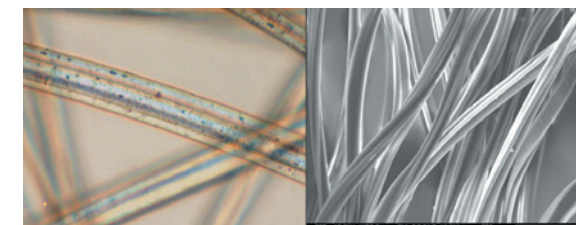



詳細は
こちらから

10

こどもたちにも快適な睡眠を



保育園用アイテム

お昼寝スヤスヤ お目覚めスッキリ

保育園用マットレス



自然な寝姿勢を保持し、寝返りも
うちやすい、ほどよい弾力をそな
えたクッション素材「プレスエア[®]」
を採用しました。96%が空気層
なのでムレにくく通気性抜群で、
耐久性にもすぐれています。汚れ
ても手軽に洗えてすぐに乾く、
保育園に最適なマットレスです。

サイズ・仕様・価格一覧

ご不明な点がございましたら、
下記までお気軽にご連絡ください

<https://omuni.co.jp/>

肌にサラサラ 取り換えラクラク

保育園用クイックケアシート



「保育園用マットレス」のための
専用シート。サラサラとしたやさ
しい寝心地で快適です。また、裏が
ポケット構造になっているので
脱着が簡単なうえ、シートが
ズレる心配ありません。



サイズ・仕様・価格一覧

01 オムニマット ラテ^{※1}

タイプ	品 番	サイズ	重 さ	カラー	備 考	価 格
洗濯タイプ	OH-7121ML	幅780×長1,910×厚120mm	約5.9kg ^{※2}	緑	リバーシブル (ソフト/ハード)	93,500円 (税込)
	OH-8121ML	幅840×長1,910×厚120mm	約6.8kg ^{※2}	青		
	OH-9121ML	幅900×長1,910×厚120mm	約7.6kg ^{※2}	茶		
切替タイプ	OH-7121MLS	幅780×長1,910×厚120mm	約7.0kg ^{※2}	緑	リバーシブル (ソフト/ハード) 防水カバー付	121,000円 (税込)
	OH-8121MLS	幅840×長1,910×厚120mm	約7.5kg ^{※2}	青		
	OH-9121MLS	幅900×長1,910×厚120mm	約8.1kg ^{※2}	茶		
清拭タイプ	OH-7121MLP	幅780×長1,910×厚120mm	約6.5kg ^{※2}	緑	リバーシブル (ソフト/ハード) 清拭カバー	121,000円 (税込)
	OH-8121MLP	幅840×長1,910×厚120mm	約7.1kg ^{※2}	青		
	OH-9121MLP	幅900×長1,910×厚120mm	約7.7kg ^{※2}	茶		

【材質】<全タイプ共通>●カセット中素材/ー層目:ポリウレタンフォーム プロファイル加工 密度40kg/m³ 硬さ137N 二層目:ポリウレタンフォーム 密度40kg/m³ 硬さ80N 三層目:ポリウレタンフォーム プロファイル加工 密度37kg/m³ 硬さ270N 両端:ポリウレタンフォーム 密度37kg/m³ 硬さ270N ●カセットカバー/ポリエステル100%

<洗濯タイプ>●セットカバー/(通気)ポリエステル100% 裏面:滑り止めシリコン接着加工

<切替タイプ>●セットカバー/(防水)表地:耐熱性ポリエチレンゴムラミネート 裏地:ポリエステル100%吸水加工 ●ワイプカバー/表地:ポリエステル100% 撥水加工 裏地:耐久ポリウレタンラミネート

<清拭タイプ>●ワイプフルカバー/ソフト面表地:ポリエステル100% 撥水加工 裏地:耐久ポリウレタンラミネート ハード面表地:耐熱性ポリエチレンゴムラミネート 裏地:ポリエステル100% 吸水加工

02 オムニマットフォレス^{※1}

タイプ	品 番	サイズ	重 さ	カラー	備 考	
洗濯タイプ	OH-7101MF	幅780×長1,910×厚100mm	約6.4kg ^{※2}	緑	リバーシブル	85,800円 (税込)
	OH-8101MF	幅840×長1,910×厚100mm	約6.8kg ^{※2}	青		
	OH-9101MF	幅900×長1,910×厚100mm	約7.2kg ^{※2}	茶		
切替タイプ	OH-7101MFS	幅780×長1,910×厚100mm	約6.9kg ^{※2}	緑	リバーシブル (ソフト/ハード) 防水カバー付	97,790円 (税込)
	OH-8101MFS	幅840×長1,910×厚100mm	約7.3kg ^{※2}	青		
	OH-9101MFS	幅900×長1,910×厚100mm	約7.8kg ^{※2}	茶		
清拭タイプ	OH-7101MFP	幅780×長1,910×厚100mm	約6.8kg ^{※2}	緑	リバーシブル (ソフト/ハード) 清拭カバー	97,790円 (税込)
	OH-8101MFP	幅840×長1,910×厚100mm	約7.2kg ^{※2}	青		
	OH-9101MFP	幅900×長1,910×厚100mm	約7.7kg ^{※2}	茶		

【材質】<全タイプ共通>●カセット中素材/ー層目:ポリウレタンフォーム プロファイル加工 密度40kg/m³ 硬さ137N 二層目:チップ集成ポリウレタンフォーム 見掛け密度64kg/m³ 硬さ295N 三層目:ポリウレタンフォーム 密度40kg/m³ 硬さ137N 4層目:ポリウレタンフォーム 密度25kg/m³ 硬さ200N 1層目両端ポリウレタンフォーム プロファイル加工 密度37kg/m³ 硬さ270N ●カセットカバー/ポリエステル100%

<洗濯タイプ>●セットカバー(通気)/ポリエステル100% 裏面:滑り止めシリコン接着加工

<切替タイプ>●セットカバー(通気)/ポリエステル100% 裏面:滑り止めシリコン接着加工 ●ブルーフカバー/表面:ポリウレタンラミネート 裏面:ポリエステル100%

<清拭タイプ>●ブルーフフルカバー/ソフト面表地:ポリウレタンラミネート 裏地:ポリエステル100% ハード面表地:ポリウレタンラミネート 裏地:ポリエステル100%

03 オムニマット^{※1}

品 番	サイズ	重 さ	カラー	備 考	価 格
OH-781M	幅780×長1,910×厚80mm	約4.0kg ^{※2}	緑	ー	56,760円 (税込)
OH-881M	幅840×長1,910×厚80mm	約4.95kg ^{※2}	青	ー	
OH-981M	幅900×長1,910×厚80mm	約5.35kg ^{※2}	茶	ー	

【材質】●カセット中素材/ポリウレタンフォーム プロファイル加工 密度37kg/m³ 硬さ270N 難燃仕様 ●カセットカバー/表地ポリエステル49%:綿51%(低温プラズマ加工) 裏地:ポリエステル100% ●セットカバー/ポリエステル100% 裏面滑り止めシリコン接着加工

04 オムニマット オプション

■ クイックケアシート

品 番	サイズ	重 さ	カラー	備 考	価 格
OR-M-G	幅1,400×長1,950mm	約485g ^{※2}	緑	ー	オープン価格
OR-L-B	幅1,500×長2,000mm	約535g ^{※2}	青	ー	

【材質】●生地/ポリエステル49%:綿51%(低温プラズマ加工) 収縮率3%以内

■ プリベントパット(清拭用防水カバー)

品 番	サイズ	重 さ	カラー	備 考	価 格
OP-781	幅780×長1,910×厚80mm	約325g ^{※2}	緑	リバーシブル 表/防水加工 裏/吸水加工	8,800円 (税込)
OP-881	幅840×長1,910×厚80mm	約340g ^{※2}	青		
OP-981	幅900×長1,910×厚80mm	約355g ^{※2}	茶		

【材質】●表地フィルム/耐久ポリウレタンラミネート ●裏地生地/ポリエステル100% 吸水加工 コーナーベルト装着

05 体位変換クッション おむみん 【カバー付き】

品 番	サイズ	重 さ	カラー	備 考	価 格
CP1-P	幅600×長300mm	約450g ^{※2}	グリーン	カバー:オープン価格	9,680円 (税込)
CP2-S	幅600×長200mmの三角形	約500g ^{※2}		カバー:オープン価格	10,340円 (税込)
CP3-W	幅860×長700mmの4段構造	約1,480g ^{※2}		カバー:オープン価格	20,570円 (税込)
CP4-B	幅820×長620mm	約1,080g ^{※2}		カバー:オープン価格	17,930円 (税込)
CP5-D	幅1,000×長300mmの2分割構造	約770g ^{※2}		カバー:オープン価格	14,410円 (税込)

【材質】●中素材/ポリウレタンフォーム オレフィン系熱可塑性複合樹脂 ●アウターカバー/ポリエステル100% ●インナーカバー/ポリエステル100%

06 イージーターン くるりん

品 番	サイズ	重 さ	カラー	備 考	価 格
EK-01	幅280mm×長310mm×最大厚100mm	約380g ^{※2} (1個当りの重量)	ー	2個1組 S字フック1個	16,500円 (税込)

【材質】●中素材/チップ集成ポリウレタンフォーム ●カバー/表地:耐久ポリウレタンラミネート 裏地:ポリエステル100% 撥水加工

07 おむみんグローブ するりん

品 番	サイズ	重 さ	カラー	備 考	価 格
OG-25	幅210×長590mm	ー	ー	2枚1組	3,850円 (税込)

【材質】●ナイロン(袖:ポリエステル)

08 車いす用クッション トリオレ the 布団

品 番	サイズ	重 さ	カラー	備 考	価 格
OK-38	幅380×長380×厚80mm	約550g ^{※2}	青	ー	12,430円 (税込)
OK-40	幅400×長400×厚80mm	約600g ^{※2}	茶	ー	

【材質】●中素材/上部:ポリウレタンフォーム 密度40kg/m³ 硬さ137N プロファイル加工 中央部:チップ集成ポリウレタンフォーム 下部:ポリウレタンフォーム 密度40kg/m³ 硬さ137N ●カバー/表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル100% 滑り止めシリコン接着加工

09 OMUNI × A.A.TH[®]

■ フォトンクッション カルナ

品 番	サイズ	重 さ	カラー	備 考	価 格
POK-40	幅400mm×長400mm×厚60mm	約810g ^{※2}	ー	ー	26,400円 (税込)

【材質】●中素材(アンカー付)/上層:ポリウレタンフォーム 中層:ポリウレタンフォーム 下層:チップ集成ポリウレタンフォーム アンカー チップ集成ポリウレタンフォーム ●アウターカバー/表面表地:ポリエステル100%(アースパウダー含有) ポリウレタンフォーム 裏面表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100%(滑り止めシリコン接着加工) ●インナーカバー/表面:ポリウレタンラミネート 裏面:ポリエステル100%

■ フォトンケット ノトス

品 番	サイズ	重 さ	カラー	備 考	価 格
PKT-M	幅750mm×長1200mm	ー	ピンクライン	Mサイズ	17,160円 (税込)
PKT-L	幅750mm×長1300mm	ー	イエローライン	Lサイズ	

【材質】●素材:ポリエステル100%(アースパウダー含有)

11 保育園用アイテム

■ 保育園用マットレス

品 番	サイズ	重 さ	カラー	備 考	価 格
OB-731MJ	幅710×長1,240×厚30mm	約1.6kg ^{※2}	ー	ー	30,008円 (税込)

【材質】●表地:ポリエステル100% ●中素材「プレスエアー[®]」ポリエーテルエステル系繊維100% ●カバー/ポリエステル 100%

■ 保育園用クイックケアシート

品 番	サイズ	重 さ	カラー	備 考	価 格
OR-S-J	幅760×長1,270mm	約202g ^{※2}	ー	ー	2,970円 (税込)

【材質】●ポリエステル49%:綿51%(低温プラズマ加工) 収縮率3%以内

TAISコード
一覧表はこちら



※1 製品のラベルとバイアステーブの色で、緑・紺・茶とサイズ分けしています。 ※2 掲載の重量は乾燥時のもので、外気の湿度等により若干の誤差があります。